
## 1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА

№	Название/маркировка	Внешний вид	Действующее вещество	Номинальное содержание
17	OXANDROL-10 Tablets 10 mg Oral 100 tabs <a href="https://lykapharma.com">https://lykapharma.com</a> Lyka Pharmaceuticals EXP: 08/2022 Protection code: PY5868	OXANDROL-10 IN Tabs Sorridone 10 mg  Water the part of the contains: Our dolore 10 mg	Оксандролон	10 мг/таб

## 2. КРАТКИЙ ОБЗОР АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Параметр	Описание				
Усло	вия хроматографирования				
Вид анализа ГХ-МС					
Подвижная фаза	Гелий				
Колонка	Rtx-5ms, 30 м.				
Детектор	Масс-спектрометр, квадруполь				
Способ ионизации	EI				
Режим ионизации	Положительная ионизация				
Режим детектирования	Сканирование масс в диапазоне 50-650 m/z				
Время анализа	16.75 мин				
Обра	I ботка результатов анализа				
Метод построения калибровочной зависимости	Внешняя калибровка				
Тип калибровочной зависимости	Линейная				
Способ построения калибровочной зависимости	По зависимости соотношения площадь пика от концентрации				
	Усло Вид анализа Подвижная фаза Колонка Детектор Способ ионизации Режим ионизации Режим детектирования Время анализа Обра Метод построения калибровочной зависимости Тип калибровочной зависимости Способ построения				

## 3. ХРОМАТОГРАММА

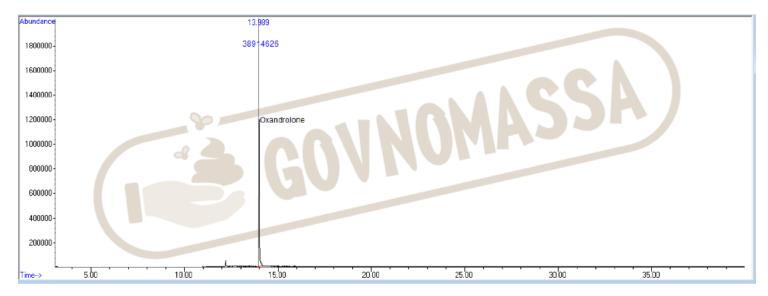

Compound number (#)	RT (min)	Scan numbe r (#)	Area (Ab*s)	Baselin e Heigth (Ab)	Absolut e Heigth (Ab)	Peak Width 50% (min)	Start Time (min)	End Time (min)	Start Height (Ab)	End Height (Ab)	Name	МΓ
1	13.986	1833	38914626	1965378	1977803	0.030	13.924	14.201	11022	17000	Оксандролон	8,9

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец	Действующее вещество	Содержание действующего вещества/аналита	Вспомогательные вещества/примеси
17	Оксандролон	8,9 мг/таблетка	-